





Das CMS

Saugapplikat

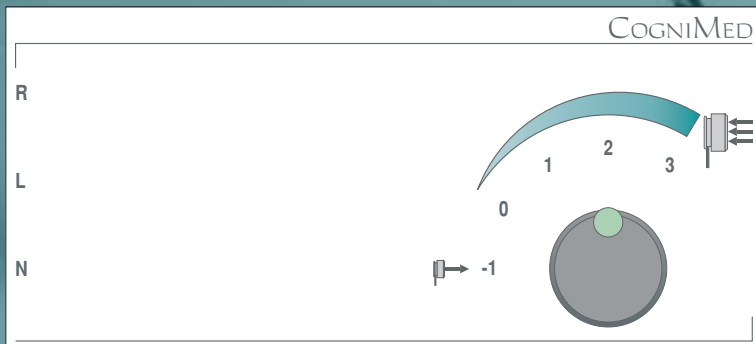

für Prävention und Rehabilitation

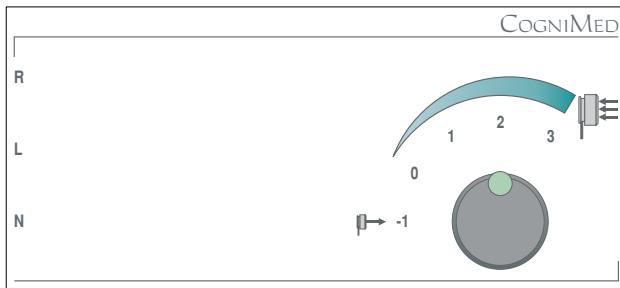

▶ **Ökonomische EKG-Überwachung im Gruppentraining**

Das CogniMed Saugapplikat CMS ist die ideale Ergänzung der TM-Cardio Serie. Es unterstützt Sie bei der einfachen und ökonomischen Abnahme eines einkanaligen EKG-Signals im täglichen Ergometer- oder Bewegungs-Gruppentraining.

Wie die TM-Serie auch, vereint das CMS einfache Bedienung mit einer Robustheit, die dem täglichen Einsatz in der Gruppen-Rehabilitation gerecht wird.

▶ **Einfach zu bedienen. Auch durch Ihre Patienten**

Ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Entwicklung des CogniMed Saugapplikates war es, die Bedienung durch den Patienten selbst zu ermöglichen und so intuitiv wie möglich zu gestalten.

Die Einstellung der Saugleistung erfolgt durch den Patienten oder Therapeuten in drei Stufen über einen mit verständlichen Symbolen versehenen Wahlschalter.

▶ **Technische Daten**

	CMS
Bedieneinheit	
Anzahl der Elektroden	3, steckbar
Elektrodenbezeichnung	R, L, N
Saugstufen	3 + "aus"
Reinigungsmodus	X
Elektroden	
Elektrodenmaterial	Ag/AgCl
Netzteil	
Nennspannung	230V / 50Hz

▶ **Da freut sich auch Ihr Verwaltungsleiter**

Das automatische Deaktivieren der Pumpe im Ruhemodus schont die beweglichen Teile des CMS. Das bedeutet für Sie eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des Systems, sowie geringe Wartungskosten.

Mit der Verwendung des besonderen Überdruck-Modus können Sie sicherstellen, dass während der Elektrodenreinigung keine Reinigungsflüssigkeit in das System eindringen kann.

Alle Patientenkabel sind mit einem Handgriff einzeln auswechselbar, ebenso alle Elektrodenköpfe. So sparen Sie Zeit und wechseln nur aus, was wirklich notwendig ist.

▶ **Maßgeschneiderte Therapiequalität**

Weil die TM-Serie so modular ist, können Sie sich Ihren Arbeitsplatz genau nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Die TM-Cardio Produkte arbeiten mit unterschiedlichsten Belastungseinheiten zusammen. Und das CMS auch.

Die Anbringung erfolgt geräteabhängig. Die Fixierung der Patientenkabel am Lenker stellt bei Ergometern eine artefaktminimierende Kabelführung sicher.

CogniMed GmbH
Holländerkoppel 27
D-23858 Reinfeld (Holstein)
Tel: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-0
Fax: +49 / (0) 45 33 / 20 70 09-1

www.cognimed.de
sales@cognimed.de